

# Easy-iSee™ PLUS DNA Size Marker

(SDM061-P/181-P, 500 µl, Store at -20°C)

## 개요

### Easy-iSee™ PLUS 100bp +3kb DNA Size Marker

Loading dye가 혼합된 Ready-to-Use의 제품으로 100 bp~3 kb 범위에 총 12개의 Fragment로 구성되어 있으며 선명한 Band로 Size를 확인 할 수 있습니다. 500bp의 Fragment는 Size 구별이 잘 될 수 있도록 Intensify되어 있습니다.

### Easy-iSee™ PLUS 1kb DNA Size Marker

250 bp-10 kb 범위에 총 13개의 Fragment로 구성되었으며, 선명한 Band로 Size를 확인 할 수 있습니다. 1 kb, 3 kb의 Fragment는 Size 구별이 잘 될 수 있도록 Intensify되어 있습니다.

## 제품의 구성 및 보관 조건

Cat No.	Components	Size	Storage
SDM061-P	Easy-iSee™ PLUS 100bp +3kb DNA Size Marker	500 µl	-20 °C
SDM181-P	Easy-iSee™ PLUS 1kb DNA Size Marker		

\* 개봉하지 않은 제품은 -20 °C 보관 시 약 2년간 안정적입니다.

## 주의사항 / 참고사항

- ① Solvent : 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10 mM EDTA
- ② 열을 가하거나 희석해서 사용하거나 Reducing agent를 넣어서는 안됩니다.


## Related products

DGS500	DualGreen™ DNA Staining Dye
DGL001	DualGreen™ DNA Loading Dye

\* 안전한 사용을 위해 유해물질 정보는 MSDS를 참조하십시오.


## Migration patterns

Easy-iSee™ PLUS  
100bp +3kb DNA Size Marker

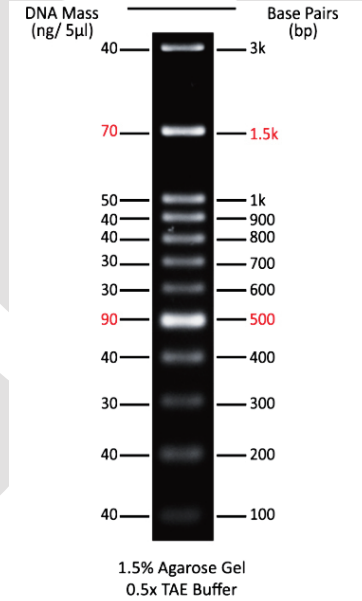

#SDM061-P

Easy-iSee™ PLUS  
1kb DNA Size Marker

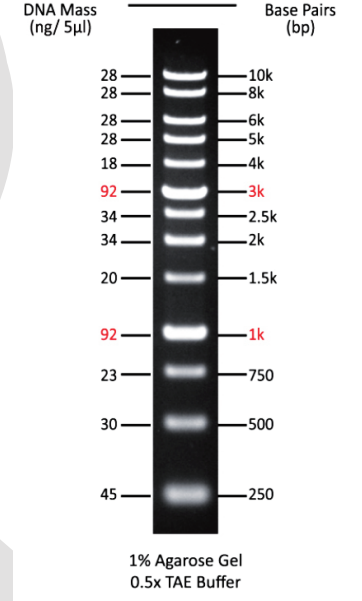

#SDM181-P